


ERG 910 PLUS ERG 911 PLUS

Funktionelle, hochwertige Ergometer

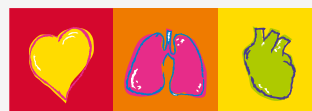

SCHILLER
The Art of Diagnostics

ERG 910 PLUS

ERG 911 PLUS

- ⌘ Anzeigekopf 180° drehbar
- ⌘ Einfache Bedienung
- ⌘ Nahezu lautloser Lauf
- ⌘ Niedriger Einstieg
- ⌘ Stabile Stahlrohrkonstruktion



ANWENDUNGSBEREICHE

Die Fahrradergometer ERG 910 plus und ERG 911 plus wurden für die Anwendung im kardiologischen Bereich aus den bewährten Vorgängermodellen weiterentwickelt, wobei auf höchste Stabilität und Praxistauglichkeit geachtet wurde. Die Geräte dienen der definierten Belastung von Patienten bei ergometrischen Untersuchungen und Therapieanwendungen.

ERG 911 plus ist in den beiden Varianten „easy“ und „smart“ erhältlich. Typ „easy“ eignet sich für Anwendungen mit einem Mastergerät (Remotebetrieb: EKG, PC, ...) während Typ „smart“ zusätzlich als Stand-alone Gerät geeignet ist. Dazu ist die Funktionalität beider Typen auf Kundenwunsch mit zahlreichen Optionen erweiterbar:

- ⌘ Blutdruckmessung mit QRS-Trigger
- ⌘ Elektrische Sattelhöhenverstellung
- ⌘ SpO₂ Messung
- ⌘ Bluetooth Verbindung
- ⌘ EKG Verstärkermodul

Unabhängig von ihrer Ausstattung erfüllen alle Geräte höchste Ansprüche nach DIN VDE 0750-238 bei der präzisen körperlichen Belastung von Probanden zur Durchführung von Messungen bei der Herz-, Kreislauf- und Lungenfunktionsdiagnostik.



ERG 910 PLUS – EASY

- ❖ Remote- (Typ „easy“) Betrieb
- ❖ Belastungsbereich 20-500 Watt
- ❖ optional: Stromversorgung 110-120V
- ❖ optional: 20-999 Watt



ERG 911 PLUS – EASY / SMART

- ❖ Remote- (Typ „easy“) und Stand-alone Betrieb (Typ „smart“) möglich
- ❖ Belastungsbereich 20-999 Watt
- ❖ Zahlreiche optionale Erweiterungen für beide Typen erhältlich (s. Technische Daten)



EASY

Ergometer mit einem Messkopf des Typs „easy“ eignen sich für den Remotebetrieb, wo sie ihre Belastungsvorgabe von einem Mastergerät (EKG, PC, ...) erhalten. Hierbei werden alle wichtigen Belastungsdaten (Blutdruck, Herzfrequenz, Tretfrequenz, Hinweis für korrekte Tretfrequenz) in kompakter Form auf dem Display dargestellt. Dazu lassen sich die optionalen Funktionen Blutdruckmessung und elektrische Sattelhöhenverstellung bequem über das Touch-Display bedienen.



SMART

Ergometer mit einem Messkopf des Typs „smart“ eignen sich sowohl für den Remotebetrieb als auch für den Stand-alone Betrieb. Sie können ihre Belastungsvorgabe von einem Mastergerät (EKG, PC, ...) oder von einem auf dem Ergometer frei programmierten Ergometrieprogramm erhalten. Außerdem sind Trainingsprogramme mit den Belastungsarten Puls-Steady-State, Konstantlast und Intervalltraining programmierbar.



Americas
SCHILLER Americas Inc.
 Doral, Florida 33172

North America:
 Phone +1 786 845 06 20
 Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramerica.com
www.schilleramerica.com

Latin America & Caribbean
 Phone +1 305 591 11 21
 Fax +1 786 845 06 02
sales@schillerla.ch
www.schillerla.ch



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
 52200 Kuala Lumpur, Malaysia
 Phone +603 6272 3033
 Fax +603 6272 2030
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
 A-4040 Linz
 Phone +43 732 70 99
 Fax +43 732 757 000
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Equipment Co., Ltd.
 100015 Beijing, China
 Phone +86 010 52007020
 Fax +86 010 52007020-8016
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Croatia
SCHILLER d.o.o.
 10000 Zagreb
 Phone +385 1 309 66 59
 Fax +385 1 309 66 60
info@schillerzg.hr
www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical
 F-67160 Wissembourg
 Phone +33 3 88 63 36 00
 Fax +33 3 88 63 36 49
info@schiller.fr
www.schiller-medical.com



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
 F-77608 Bussy St Georges
 Phone +33 1 64 66 50 00
 Fax +33 1 64 66 50 10
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
 D-85622 Feldkirchen b. München
 Phone +49 89 62 99 81 0
 Fax +49 89 609 50 90
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Hungary
SCHILLER Diamed Ltd.
 H-1141 Budapest
 Phone +36 1 383 4780 / +36 1 460 9491
 Fax +36 1 383 4778
info@schillerhungary.hu
www.schillerhungary.hu



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
 Mumbai - 400 059, India
 Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
 Fax +91 22 2920 9142
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
 PL-02-729 Warszawa
 Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
 Fax +48 22 843 20 89
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
 125040 Moscow, Russia
 Phone +7 (495) 970 11 33
 Fax +7 (495) 956 29 10
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



Serbia
SCHILLER d.o.o.
 11010 Beograd
 Phone +381 11 39 79 508
 Fax +381 11 39 79 518
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
 2310 Slovenska Bistrica
 Phone +386 2 843 00 56
 Fax +386 2 843 00 57
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
 ES-28232 Las Rozas/Madrid
 Phone +34 91 713 01 76
 Fax +34 91 355 79 33
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
 CH-8953 Dietikon
 Phone +41 44 744 30 00
 Fax +41 44 740 37 10
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKİYE
 Okmeydanı-Sisli - Istanbul
 Phone +90 212 210 8681 (pbx)
 Fax +90 212 210 8684
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK
 Bellshill, ML4 3PR
 Phone +44 1698 744 505
 Fax +44 1698 744 474
sales@schilleruk.com
www.schilleruk.com

