

# FRED® EASYPORT® PLUS


Der kleine und leistungsfähige Defibrillator für jedermann, jederzeit, überall



# FRED® EASYPORT® PLUS

Der ideale Begleiter für unterwegs

Der Taschendefibrillator FRED® easyport® plus passt in jede Ärztetasche und in jedes Notfallkit – der ideale Begleiter für jeden Einsatz.

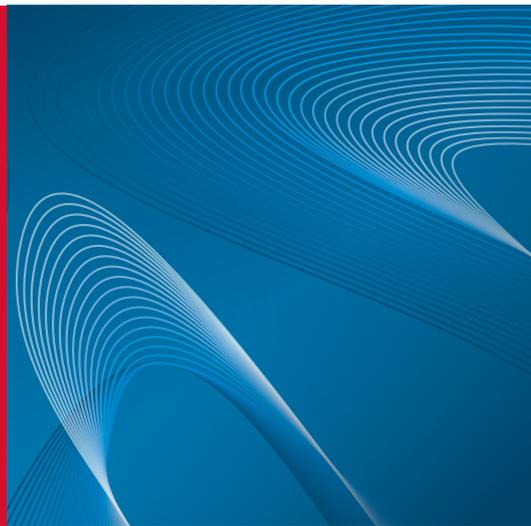

## ES GEHT UNS ALLE AN

Weltweit erleiden jährlich mehr als 7 Millionen Menschen einen plötzlichen Herzstillstand. Es kann jederzeit jemanden treffen, egal wo, egal wann.

Während der Defibrillation wird elektrische Energie ans Herz abgegeben um den richtigen Herzrhythmus wiederherzustellen. Defibrillation in Kombination mit adäquater Herzdruckmassage ist die einzige Therapieform, welche das Leben eines Patienten retten kann.

## LEICHT UND KLEIN

Der Taschendefibrillator FRED easyport plus wiegt nur 780 Gramm und kombiniert geringe Grösse mit umfangreicher Funktionalität.

## SCHOCK SOFORT BEREIT, FALLS NÖTIG

Internationale Richtlinien unterstreichen die Wichtigkeit, die Dauer bis zur Schockabgabe so kurz wie möglich zu halten. Um diese Dauer zu minimieren verfügt der FRED easyport plus über ein rasches Analysesystem. Zudem lädt er die benötigte Energie systematisch, so dass der Schock abgegeben werden kann sobald das Gerät einen Schock empfiehlt.

## AUF JEDEN BENUTZER ANGEPASST

Der FRED easyport plus ist geeignet für regelmässige wie auch seltene Benutzer von Defibrillatoren. Er kann mit einem wiederaufladbaren Akku oder mit Einweg-Batterien betrieben werden. Das externe Ladegerät kann zwei Akkus gleichzeitig aufladen.

## HLW-FEEDBACK

Defibrillation alleine reicht nicht aus. Um die Organe mit genügend Sauerstoff zu versorgen, muss die Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW) korrekt durchgeführt werden um eine Durchblutung wiederherzustellen.

Um eine möglichst effiziente Herzdruckmassage zu erreichen, unterstützt Sie der FRED easyport plus wie folgt:

- ❖ Anzeige der korrekten Tiefe, Frequenz und Entlastung\*
- ❖ Vorgabe eines regelmässigen Rhythmus via Metronom

Mit dem ARGUS LifePoint-Sensor wird der Benutzer während der Herzdruckmassage visuell mit farbcodierten Meldungen auf der Anzeige unterstützt.

\* Entlastung nicht verfügbar in Frankreich, Deutschland, Grossbritannien und den USA



## INFORMATIONS- ÜBERWACHUNG

Der FRED easyport plus zeichnet Interventionsdaten auf, wodurch Ärzte und Notärzte einen besseren Überblick über den Zustand des Patienten erhalten.

- HLW-Qualität
- EKG-Kurve
- Impedanzkurve
- Ereignisse

## ABRUF VON INFORMATIONEN

Dank der USB- und Bluetooth-Funktionalitäten können gespeicherte Dateien ganz einfach im Datenverwaltungssystem SEMA von SCHILLER geprüft und verwaltet werden.

## FINDEN SIE DAS GERÄT, DAS ZU IHNEN PASST

Der FRED easyport plus ist in drei Versionen verfügbar, welche auf die verschiedenen Benutzerstufen angepasst sind.



### AED FIRST

Der halb-automatische FRED easyport plus mit seinem grauen Gehäuse erfordert die Bestätigung des Retters, um einen Schock abzugeben.

Auf dem grossen Farb-LCD kann eine EKG-Kurve angezeigt werden.

Geeignet für Ersthelfer.



### AED AUTO

Beim vollautomatischen FRED easyport plus ist kein Eingreifen des Retters erforderlich. Nach der Analyse bestimmt das Gerät, ob ein Schock nötig ist. Der Schock wird gegebenenfalls automatisch abgegeben.

Auf dem grossen Farb-LCD kann eine EKG-Kurve angezeigt werden.

Geeignet für geschulte Laien.



### AED MANUAL

Der manuelle FRED easyport plus sticht durch sein rotes Gehäuse hervor und erlaubt es Ärzten und Rettungssanitätern, in den manuellen Modus umzuschalten. Dank der EKG-Anzeige können medizinische Fachpersonen entscheiden, ob ein Schock nötig ist.

Geeignet für Ärzte.



**SCHILLER**  
FRED easyport plus

00:00:04  
PLUG AND APPLY ELECTRODES



**ELECTRODES**  
FRED PA-1,  
Sport-ARRIS Pro Life Class 1,  
Type 2, CARBOVIT AT-101, 100%



## KLEIN UND LEISTUNGSFÄHIG

Der FRED easyport plus wiegt nur 780 Gramm und gibt Schocks mit bis zu 200 Joule ab. Die Multipulse Biowave®-Technologie garantiert einen effizienten und sicheren Defibrillationsschock und minimiert gleichzeitig Schäden am Myokard.

## KOSTBARE SEKUNDEN GEWINNEN

Die Defibrillationselektroden sind vorangeschlossen und können somit rasch auf der Brust des Patienten platziert werden. Die Rhythmus-Analyse beginnt sofort, um die Dauer bis zur Schockabgabe zu minimieren.

## STETS EINSATZBEREIT

Der FRED easyport plus führt regelmässige Selbsttests durch um sicherzustellen, dass das Gerät korrekt funktioniert. Der Status wird mittels blinkender Ein-/Aus-Taste angezeigt.

## DATENÜBERTRAGUNG AN SEMA

Interventionsdaten können via USB oder Bluetooth übertragen werden für die Überprüfung durch medizinische Fachpersonen.

## ROBUST

Mit seiner IP44-Klassifizierung ist der FRED easyport plus gegen das Eindringen von Spritzwasser geschützt.





## TASCHEDEFIBRILLATOR

Der FRED easyport plus misst bloss 150 × 143 Millimeter – dieses Foto zeigt das Gerät in Originalgrösse (1:1)!

## FÜR ALLE UMGEBUNGEN GEEIGNET

Der FRED easyport besitzt eine grosse LCD-Anzeige in Farbe, bei welcher die Helligkeit automatisch angepasst wird – alle Informationen sind stets auf einen Blick einsehbar.

## INTUITIVER KINDERMODUS

Drücken Sie einfach diese Taste um den Patientenmodus zu ändern – keine anderen Elektroden erforderlich.

## HLW-FEEDBACK

Das integrierte Metronom gibt den korrekten Rhythmus vor und führt den Benutzer während der Intervention.

Zusätzlich wird der Benutzer vom ARGUS LifePoint-Sensor während der Herzdruckmassage visuell mit farbcodierten Meldungen auf der Anzeige unterstützt.

## OPTIMIERTE BENUTZEROBERFLÄCHE

Klare Anweisungen durch drei einfache Schritte mit Illustrationen und gesprochenen Instruktionen.



**Americas**  
SCHILLER Americas Inc.  
Doral, Florida 33172

**North America:**  
Phone +1 786 845 06 20  
Fax +1 786 845 06 02  
sales@schilleramericas.com  
www.schilleramericas.com

**Latin America & Caribbean**  
Phone +1 305 591 11 21  
Fax +1 786 845 06 02  
sales@schilleramericas.com  
www.schilleramericas.com



**Asia**  
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia  
52200 Kuala Lumpur, Malaysia  
Phone +603 6272 3033  
Fax +603 6272 2030  
sales@schiller.com.my  
www.schiller-asia.com



**Austria**  
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.  
A-4040 Linz  
Phone +43 732 70 99 0  
Fax +43 732 757 000  
sales@schiller.at  
www.schiller.at



**China**  
Alfred Schiller (Beijing) Medical Equipment  
Co.,Ltd.  
100015 Beijing, China  
Phone +86 010 52007020  
Fax +86 010 52007020-8016  
info@schillerchina.com  
www.schillermedical.cn



**Croatia**  
SCHILLER d.o.o.  
10000 Zagreb  
Phone +385 1 309 66 59  
Fax +385 1 309 66 60  
info@schillerzg.hr  
www.schiller.hr



**France**  
SCHILLER Médical  
F-67160 Wissembourg  
Phone +33 3 88 63 36 00  
Fax +33 3 88 63 36 49  
info@schiller.fr  
www.schiller-medical.com



**France (distribution France)**  
SCHILLER France S.A.S.  
F-77608 Bussy St Georges  
Phone +33 1 64 66 50 00  
Fax +33 1 64 66 50 10  
contact@schillerfrance.fr  
www.schiller-france.com



**Germany**  
SCHILLER Medizintechnik GmbH  
D-85622 Feldkirchen b. München  
Phone +49 89 62 99 81 0  
Fax +49 89 609 50 90  
info@schillermed.de  
www.schillermed.de



**India**  
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.  
Mumbai - 400 059, India  
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141  
Fax +91 22 2920 9142  
sales@schillerindia.com  
www.schillerindia.com



**Poland**  
SCHILLER Poland Sp. z o.o.  
PL-02-729 Warszawa  
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90  
Fax +48 22 843 20 89  
schiller@schiller.pl  
www.schiller.pl



**Russia & C.I.S.**  
AO SCHILLER.RU  
125040 Moscow, Russia  
Phone +7 (495) 970 11 33  
Fax +7 (495) 956 29 10  
mail@schiller.ru  
www.schiller.ru



**Serbia**  
SCHILLER d.o.o.  
11010 Beograd  
Phone +381 11 39 79 508  
Fax +381 11 39 79 518  
info@schiller.rs  
www.schiller.rs



**Slovenia**  
SCHILLER d.o.o.  
2310 Slovenska Bistrica  
Phone +386 2 843 00 56  
Fax +386 2 843 00 57  
info@schiller.si  
www.schiller.si



**Spain**  
SCHILLER ESPAÑA, S.A.  
ES-28232 Las Rozas/Madrid  
Phone +34 91 713 01 76  
Fax +34 91 355 79 33  
schiller@schiller.es  
www.schiller.es



**Switzerland**  
SCHILLER-Reomed AG  
CH-8912 Obfelden  
Phone +41 44 744 30 00  
Fax +41 44 740 37 10  
sales@schiller-reomed.ch  
www.schiller-reomed.ch



**Turkey**  
SCHILLER TÜRKIYE  
Okmeydani-Sisli - Istanbul  
Phone +90 212 210 8681 (pbx)  
Fax +90 212 210 8684  
info@schiller.com.tr  
www.schiller-turkiye.com



**United Kingdom**  
SCHILLER UK  
Bellshill, ML4 3PR  
Phone +44 1698 744 505  
Fax +44 1698 744 474  
sales@schilleruk.com  
www.schilleruk.com

Die Verfügbarkeit der Geräte auf Ihrem Markt unterliegt der behördlichen Zulassung.

2020/03\_DE



Article no.: 2.500781



**SCHILLER**  
The Art of Saving Lives