


medilog®AR


Effizienter und zuverlässiger state-of-the-art Holter

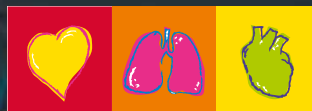

SCHILLER
The Art of Diagnostics

medilog®AR

- Robust, stoss- und spritzwasserfest sowie leicht zu reinigen
- Flexibles Doppelbatteriekonzept für eine Aufzeichnungsdauer von mehr als 14 Tagen
- Erkennung von Vorhofflimmern/Vorhofflattern in null Sekunden, basierend auf der direkten P-Wellen-Analyse

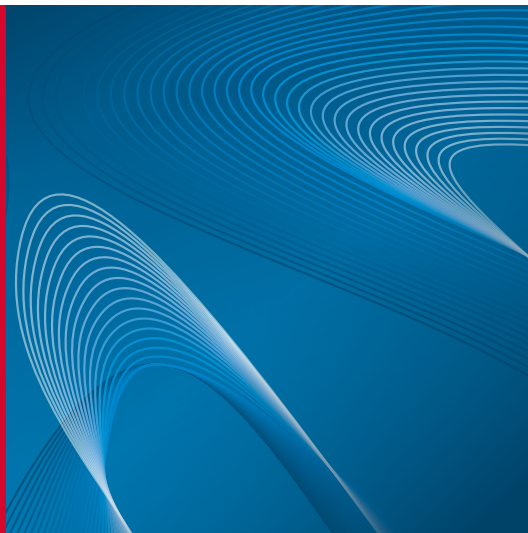

PERFEKT GEEIGNET FÜR KLINISCHE ROUTINE

Mit dem stoss- und spritzwasserfesten Design ist der medilog®AR Holter besonders geeignet für die tägliche klinische Routine. Der Holter und seine Tragehülle sind robust und leicht zu reinigen.

ENERGIE FÜR ZWEI WOCHEN

Dank dem Doppelbatteriekonzept kann der Patient mehr als 14 Tage überwacht werden, ohne dass der Arzt die Batterien wechseln muss.



Umweltfreundliches Doppelbatteriekonzept (Abbildung)

UMWELTFREUNDLICHER AKKU:

Sie wählen die gewünschte Aufzeichnungsdauer von 1, 3 oder 7 Tagen und der medilog®AR passt die Einstellungen entsprechend der Laufzeit an. Der qualitativ hochstehende interne Akku wird via USB aufgeladen.

EINWEG-AAA-BATTERIEN:

Mit Standard-AAA-Batterien können die Durchlaufzeiten in gut ausgelasteten Kliniken gesenkt werden.

MEHR ALS 14 TAGE:

Für eine maximale Aufzeichnungsdauer kann ein vollständig aufgeladener interner Akku mit einer AAA-Batterie kombiniert werden. So erreicht man eine Aufzeichnungsdauer von mehr als 14 Tagen mit automatischer Erkennung von Vorhofflimmern.

VERSCHIEDENE TRAGEOPTIONEN

Der medilog®AR ist so flach, dass er sogar in die Hosentasche passt. In der Tragehülle kann der Holter am Gürtel getragen werden oder am Trageriemen direkt am Körper.

SPITZENPERFORMANCE

Der medilog®AR bietet auf 3 Kanälen eine Abtastfrequenz von 32'000 Hz wie sie sonst nur im Ruhe-EKG üblich ist. Dies ermöglicht exzellente Artefaktunterdrückung und sorgt so für stets saubere, verwertbare EKGs, die mit minimalem Zeitaufwand ausgewertet werden können.

ERKENNUNG VON VORHOFF-FLIMMERN/-FLATTERN INNERT WENIGER ALS 1 SEKUNDE:

Genau wie ein Kardiologe, sucht der medilog®AR nach Vorhofflimmern- und Vorhofflattern-Episoden, indem er die P-Wellen betrachtet.



Anzeige für die einfache Bedienung

Mikrophon zur Aufzeichnung der Patienten-ID

Robuste Tragehülle, verschiedene Trageoptionen

Tasten für Patientenergebnisse

Läuft mit internem Akku oder mit normalen AAA-Batterien

USB-Datenaustausch (Plug-and-play-Funktion)

Abnehmbares 5-adriges Patientenkabel, alternativ 7-adrig für noch höhere Zuverlässigkeit

ERKENNUNG VON ATMUNGS-AKTIVITÄT:

Dank der Aufzeichnung des vom EKG abgeleiteten Atmungsaktivitätssignals sucht der medilog®AR nach möglichen Unterbrechungen der Atmungsaktivität während des Schlafs. Der optionale SpO₂-Sensor bringt zusätzliche Information zur Atmungsaktivitätsbewertung und wird via Bluetooth verbunden.



SpO₂-Sensor, zur Messung nachts

EINZIGARTIGE FUNKTIONEN VER-SCHAFFEN DURCHBLICK

Die Erkennung von Vorhofflimmern in null Sekunden, die Analyse der Atmungsaktivität und hochauflösende HRV sind nur einige der herausragenden Funktionen des medilog®AR. Die Analyse wird von der renommierten medilog® DARWIN2-Software durchgeführt und bietet faszinierende Einblicke.



Americas
SCHILLER Americas Inc.
 Doral, Florida 33172

North America:
 Phone +1 786 845 06 20
 Fax +1 786 845 06 02
 sales@schilleramericas.com
 www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
 Phone +1 305 591 11 21
 Fax +1 786 845 06 02
 sales@schilleramericas.com
 www.schilleramericas.com



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
 52200 Kuala Lumpur, Malaysia
 Phone +603 6272 3033
 Fax +603 6272 2030
 sales@schiller.com.my
 www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
 A-4040 Linz
 Phone +43 732 70 90
 Fax +43 732 757 000
 sales@schiller.at
 www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Equipment Co.,Ltd.
 100015 Beijing, China
 Phone +86 010 52007020
 Fax +86 010 52007020-8016
 info@schillerchina.com
 www.schillermedical.cn



Croatia
SCHILLER d.o.o.
 10000 Zagreb
 Phone +385 1 309 66 59
 Fax +385 1 309 66 60
 info@schillerzg.hr
 www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical
 F-67160 Wissembourg
 Phone +33 3 88 63 36 00
 Fax +33 3 88 63 36 49
 info@schiller.fr
 www.schiller-medical.com



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
 F-77608 Bussy St Georges
 Phone +33 1 64 66 50 00
 Fax +33 1 64 66 50 10
 contact@schillerfrance.fr
 www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
 D-85622 Feldkirchen b. München
 Phone +49 89 62 99 81 0
 Fax +49 89 609 50 90
 info@schillermed.de
 www.schillermed.de



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
 Mumbai - 400 059, India
 Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
 Fax +91 22 2920 9142
 sales@schillerindia.com
 www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
 PL-02-729 Warszawa
 Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
 Fax +48 22 843 20 89
 schiller@schiller.pl
 www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
 125040 Moscow, Russia
 Phone +7 (495) 970 11 33
 Fax +7 (495) 956 29 10
 mail@schiller.ru
 www.schiller.ru



Serbia
SCHILLER d.o.o.
 11010 Beograd
 Phone +381 11 39 79 508
 Fax +381 11 39 79 518
 info@schiller.rs
 www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
 2310 Slovenska Bistrica
 Phone +386 2 843 00 56
 Fax +386 2 843 00 57
 info@schiller.si
 www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
 ES-28232 Las Rozas/Madrid
 Phone +34 91 713 01 76
 Fax +34 91 355 79 33
 schiller@schiller.es
 www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
 CH-8912 Obfelden
 Phone +41 44 744 30 00
 Fax +41 44 740 37 10
 sales@schiller-reomed.ch
 www.schiller-reomed.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKIYE
 Okmeydani-Sisli - Istanbul
 Phone +90 212 210 8681 (pbx)
 Fax +90 212 210 8684
 info@schiller.com.tr
 www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK
 Bellshill, ML4 3PR
 Phone +44 1698 744 505
 Fax +44 1698 744 474
 sales@schilleruk.com
 www.schilleruk.com

Die Verfügbarkeit der Geräte auf Ihrem Markt unterliegt der behördlichen Zulassung.

2019/01_DE



Article no.: 2_500300



SCHILLER
 The Art of Diagnostics